

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ROTOR Z ODOMETREM 901**

Nr katalogowy:	RF-901
Waga:	2,5 kg
Szerokość:	49 cm
Wysokość:	24 cm
Długość:	36 cm



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z rotora należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Rotor przeznaczony jest do ćwiczeń czynnych (oporowych) kończyn dolnych i górnych przy schorzeniach urazowo ortopedycznych oraz reumatycznych. Ma zastosowanie na oddziałach rehabilitacji, w domach pomocy społecznej oraz do ćwiczeń w domu. Rotor jest przeznaczony do bezpiecznego wzmocnienia mięśni, ćwiczeń kondycyjnych mięśni, stymulacji układu krążenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

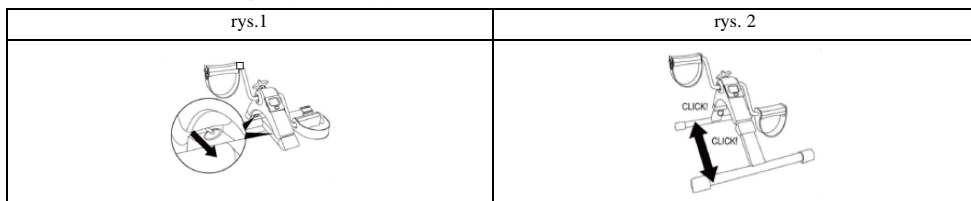
1. Przy ćwiczeniach czynnych kończyn górnych rotor należy ustawić na stole.
2. Ćwiczenia należy przeprowadzać w pozycji siedzącej. Zamontowane nasadki przeciwpoślizgowe zabezpieczają rotor przed przesuwaniem się.
3. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.
4. Należy dopilnować, aby przed rozpoczęciem rotor stał na stabilnej płaskiej powierzchni. W razie potrzeby użyj maty antypoślizgowej.
5. Przy ćwiczeniach czynnych kończyn dolnych rotor należy ustawić bezpośrednio na podłodze.
6. Ćwiczenia należy przeprowadzać w pozycji siedzącej. Zamontowane nasadki przeciwpoślizgowe zabezpieczają rotor przed przesuwaniem się.
7. Nie pozwól dzieciom na zbliżanie się do rotora w czasie ćwiczeń. Nie pozwól im wspinać się na urządzenie.
8. W czasie ćwiczeń upewnij się, że wokół przyrządu znajduje się 1 m wolnej przestrzeni.
9. W czasie ćwiczeń noś wygodną odzież.
10. Ćwicz we własnym tempie, nie wykonuj nadmiernej liczby ćwiczeń.
11. Nigdy nie stawaj na pedałach i nie ćwicz w pozycji stojącej.
12. Metal wokół korby i korba mogą się nagrzać w czasie ćwiczeń.
13. Przerwij ćwiczenia, jeśli czujesz zawroty głowy lub źle się czujesz.
14. Jeśli używasz rotora do ćwiczeń kończyn górnych, upewnij się, że stoi na stole na płaskiej i stabilnej powierzchni.
15. Unikaj luźnej części garderoby, które mogą zaplatać się w wystające części przyrządu w czasie ćwiczeń.
16. Nie używaj rotora z nieokreślonymi częściami. Przed każdym użyciem sprawdzaj czy pedały są prawidłowo zamocowane.

MONTAŻ I CZĘŚCI ROTORA

1. Rotor jest dostarczany w pełni wyregulowany i zmontowany.

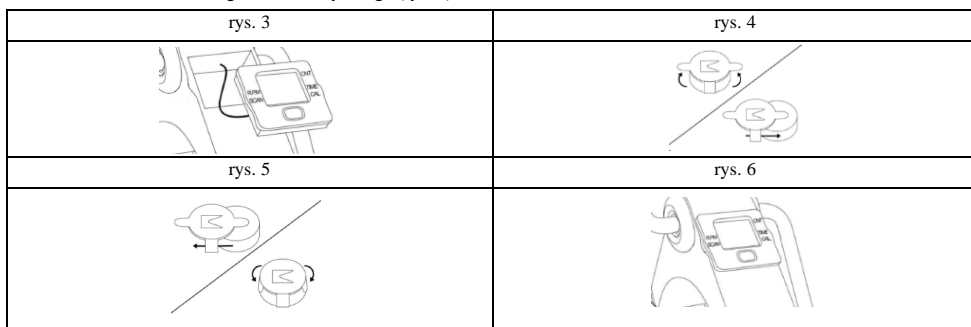
**SKŁADANIE I ROZKŁADANIE**

1. Aby złożyć rotor pociągnij w górę nóżki (rys.1).
2. Aby rozłożyć rotor pociągnie w dół jego nóżki (rys. 2).



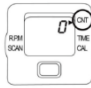

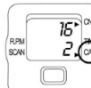

WYMIANA BATERII


1. Wyjmij licznik z gniazda elektrycznego (rys. 3).
2. Za ekranem znajduje się bateria, wyjmij ją (rys. 4).
3. Włóż nową baterię (rys. 5).
4. Włóż licznik do gniazda elektrycznego (rys. 6).



FUNKCJE LICZNIKA

Aby włączyć wyświetlacz, naciśnij raz na czerwony przycisk lub zacznij pedałować. Wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 4 minutach bezczynności. Wszystkie funkcje wyświetlacza włączają się, gdy zaczniesz pedałować i wyłączają się po zatrzymaniu. Aby je przełączyć, naciskaj czerwony przycisk, aż strzałka wskaże żądaną funkcję.

Liczba wykonanych obrotów	
Czas trwania treningu	
Szacunkowa liczba spalonych kalorii	
Liczba obrotów na minutę	

Przełączenie	
--------------	--

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę rotora pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
2. Zaleca się regularne czyszczenie rotora miękką szmatką i wodą z mydłem. Rotor po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.



UWAGA! Do czyszczenia rotora nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.







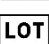
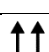




UWAGA! Raz na miesiąc zaleca się wkropić kilka kropli oleju przeladniowego do otworu pod pokrętło regulacji oporu.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	Stal
Podnóżki	ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) + PVC (polichlorek winylu)
Nasadki	PVC (polichlorek winylu)
Pokrętło	ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
Część łącząca	ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



REHA FUND Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
 tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
 e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.2
 Wydano: 02/2021

**KARTA GWARANCYJNA
ROTOR Z ODOMETREM 901**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczętka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Rotor jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że rotor był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją rotora opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia rotora np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					